

Работа 5.5.5

Компьютерная сцинтилляционная γ -спектрометрия

Шарапов Денис, Колесников Иван, Б05-004

Содержание

1	Аннотация	2
2	Теоретические сведения	2
3	Энергетическое разрешение спектрометра	3
4	Экспериментальная установка	3
5	Результаты измерений и обработка данных	4
5.1	Калибровка	4
5.2	Определение параметров образцов	4
5.3	Исследование спектра неизвестного образца	5
5.4	Исследование зависимости энергетического разрешения от энергии регистрируемого излучения .	5
5.5	Энергии края комптоновского рассеяния	6
6	Вывод	6
7	Приложение: спектрограммы	6

1 Аннотация

Цель работы: исследовать спектры излучения различных источников, характеризовать различные пики в спектрах радиоактивных веществ.

В работе используются: сцинтиллятор, фотоэлектронные умножители (ФЭУ), предусилитель импульсов, высоковольтный блок питания для ФЭУ, блок преобразования аналоговых импульсов с ФЭУ в цифровой код, компьютер.

2 Теоретические сведения

Фотоэффект — процесс взаимодействия гамма-кванта с электроном, связанным с атомом, при котором электрону передается вся энергия гаммакванта. При этом электрону сообщается кинетическая энергия

$$T_e = E_\gamma - I_i,$$

где E_γ — энергия гамма-кванта, I_i — потенциал ионизации i -той оболочки атома. Фотоэффект особенно существен для тяжелых веществ, где он идет с заметной вероятностью даже при высоких энергиях гамма-квантов. В легких веществах фотоэффект становится заметен лишь при относительно небольших энергиях гамма-квантов. Наряду с фотоэффектом, при котором вся энергия гамма-кванта передается атомному электрону, взаимодействие гаммаизлучения со средой может приводить к его рассеянию, т.е. отклонению от первоначального направления распространения на некоторый угол.

Эффект Комптона — упругое рассеяние фотона на свободном электроне, сопровождающееся изменением длины волны фотона (реально этот процесс происходит на слабо связанных с атомом внешних электронах). Максимальная энергия образующихся комптоновских электронов соответствует рассеянию гамма-квантов на 180° и равна

$$E_{\max} = \frac{\hbar\omega}{1 + \frac{mc^2}{2\hbar\omega}}.$$

Процесс образования электрон-позитронных пар. При достаточно высокой энергии гамма-кванта наряду с фотоэффектом и эффектом Комптона может происходить третий вид взаимодействия гамма-квантов с веществом — образование электрон-позитронных пар. Процесс образования пар не может происходить в пустоте, так как в этом случае не выполняются законы сохранения энергии и импульса. В присутствии ядра или электрона процесс образования пары гамма-квантов возможен, так как можно распределить энергию и импульс гамма-кванта между тремя частицами без противоречия с законами сохранения. При этом если процесс образования пары идет в кулоновском поле ядра или протона, то энергия образующегося ядра отдачи оказывается весьма малой, так что пороговая энергия гамма-кванта E_0 , необходимая для образования пары, практически совпадает с удвоенной энергией покоя электрона

$$E_0 \approx 2mc^2 = 1.022 \text{ МэВ}.$$

Появившийся в результате процесса образования пар электрон свою энергию на ионизацию среды. Таким образом, вся энергия электрона остается в детекторе. Позитрон будет двигаться до тех пор, пока практически не остановится, а затем аннигилирует с электроном среды, в результате чего появятся два гамма-кванта. Т.е., кинетическая энергия позитрона также останется в детекторе. Далее возможны три варианта развития событий:

1. оба родившихся гамма-кванта не вылетают из детектора, и тогда вся энергия первичного гамма-кванта останется в детекторе, а в спектре появится пик с $E = E_\gamma$;
2. один из родившихся гамма-квантов покидает детектор, и в спектре появляется пик, соответствующий энергии $E = E_\gamma - E_0$, где $E_0 = mc^2 = 511 \text{ кэВ}$;
3. оба родившихся гамма-кванта покидают детектор, и в спектре появляется пик, соответствующий энергии $E = E_\gamma - 2E_0$, где $2E_0 = 2mc^2 = 1022 \text{ кэВ}$.

Таким образом, любой спектр, получаемый с помощью гамма-спектрометра, описывается несколькими компонентами, каждая из которых связана с определенным физическим процессом. Как описано выше, основными физическими процессами взаимодействия гамма-квантов с веществом является фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-позитронных пар, и каждый из них вносит свой вклад в образование спектра. Помимо этих процессов, добавляется *экспонента*, связанная с наличием фона, *пик характеристического излучения*, возникающий при взаимодействии гамма-квантов с окружающим веществом, а также *пик обратного рассеяния*,

образующийся при энергии квантов $E_\gamma \gg mc^2/2$ в результате рассеяния гамма-квантов на большие углы на материалах конструктивных элементов детектора и защиты. Положение пика обратного рассеяния определяется по формуле

$$E_{\text{обр}} = \frac{E}{1 + 2E/mc^2}, \quad (1)$$

где E – энергия фотопика.

3 Энергетическое разрешение спектрометра

Даже при поглощении частиц с одинаковой энергией амплитуда импульса на выходе фотоприёмника сцинтилляционного детектора меняется от события к событию. Это связано:

1. со статистическим характером процессов сбора фотонов на фотоприёмнике и последующего усиления,
2. с различной вероятностью доставки фотона к фотоприемнику из разных точек сцинтиллятора,
3. с разбросом высвечиваемого числа фотонов

В результате в набранном спектре линия (которая для идеального детектора представляла бы дельта-функцию) оказывается размытой, её часто описывают гауссианом. Энергетическим разрешением спектрометра называется величина

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i}, \quad (2)$$

где ΔE_i – ширина пика полного поглощения, измеренная на половине высоты, E_i – энергия регистрируемого γ -излучения. Значение E_i пропорционально среднему числу фотонов \bar{n}_i на выходе ФЭУ, т.е.:

$$E_i = \alpha \bar{n}_i. \quad (3)$$

Полуширина пика полного поглощения ΔE_i пропорциональна среднеквадратичной флуктуации $\overline{\Delta n_i}$. Т.к. n_i является дискретной случайной величиной, которая распределена по закону Пуассона, то $\overline{\Delta n_i} = \sqrt{\bar{n}_i}$ и поэтому

$$\Delta E_i = \alpha \overline{\Delta n_i} = \alpha \sqrt{\bar{n}_i}. \quad (4)$$

Из (3), (4) получаем, что

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i} = \frac{\text{const}}{\sqrt{E_i}}. \quad (5)$$

Поскольку энергетическое разрешение зависит от энергии, его следует указывать для конкретной энергии. Чаще всего разрешение указывают для энергии гамма-линии ^{137}Cs (661, 7 кэВ).

4 Экспериментальная установка

Принципиальная блок-схема гамма-спектрометра, изучаемого в данной работе, показана на рис. 1.

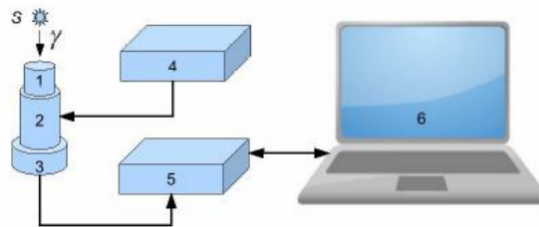


Рис. 1: Принципиальная блок-схема спектрометра: 1 – сцинтиллятор, 2 – ФЭУ, 3 – предусилитель импульсов, 4 – высоковольтный блок питания для ФЭУ, 5 – блок преобразования аналоговых импульсов с ФЭУ в цифровой код (АЦП), 6 – компьютер для сбора данных, их обработки и хранения

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Калибровка

Используя известные значения (табл. 1) пиков в спектрах натрия и цезия, построим калибровочный график соответствия номера канала определённому значению энергии (рис. 2). Получаем уравнение для перехода от номера канала к значению энергии:

$$E = 0.73N_i - 48,41 \text{ [кэВ]}.$$

Таблица 1: Известные значения пиков в спектрах натрия и цезия

Образец	E , кэВ	N
^{22}Na	511,0	766
^{22}Na	661,7	971
^{137}Cs	1275,0	1811

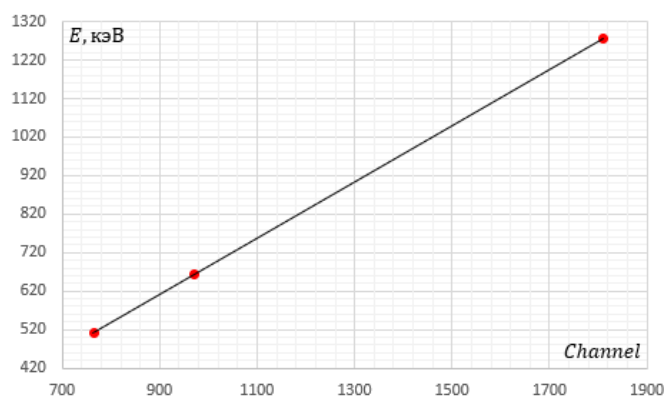


Рис. 2: Калибровочный график для перехода от номера канала к значению энергии

5.2 Определение параметров образцов

Используя калибровочный график, определим для всех остальных источников значения энергии пиков полного поглощения E_i , их ширины на половине высоты ΔE_i и энергетическое разрешение R_i . Результаты занесём в таблицу 2. В последний столбец E запишем справочные значения для соответствующих энергий пиков полного поглощения.

Таблица 2: Пики полного поглощения различных образцов

Элемент	N_i	ΔN_i	E_i , МэВ	ΔE_i , МэВ	R_i	E , МэВ
^{22}Na	1811	83	1.274	0.030	0.023	1.274
^{60}Co	1670	37	1.171	0.027	0.023	1.173
^{60}Co	1892	45	1.333	0.033	0.024	1.332
^{137}Cs	967	62	0.662	0.022	0.032	0.662
^{241}Am	149	13	0.060	0.004	0.067	0.595
^{152}Eu	235	17	0.123	0.006	0.045	0.122
^{152}Eu	399	31	0.243	0.010	0.040	0.245
^{152}Eu	534	41	0.341	0.015	0.041	0.344

5.3 Исследование спектра неизвестного образца

Исследуем спектр неизвестного образца (рис. 3). Для этого вынем сцинтиллятор из установки и снимем спектр непосредственно в трубке с образцом. Построим на одном графике спектры цезия и неизвестного образца — можно легко убедиться, что пик полного поглощения у них практически совпадает. Делаем вывод, что исследуемый образец — это ^{137}Cs .

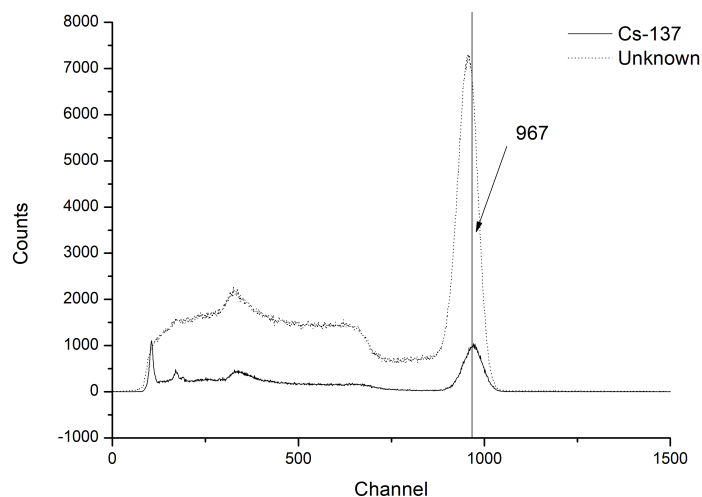


Рис. 3: Спектры ^{137}Cs и неизвестного образца

5.4 Исследование зависимости энергетического разрешения от энергии регистрируемого излучения

Проверим зависимость (5). Для этого построим график зависимости $R^2 = f(1/E)$ (рис. 4). Наблюдается линейная зависимость. Из-за неточностей в определении полуширины пиков точки не лежат на одной прямой.

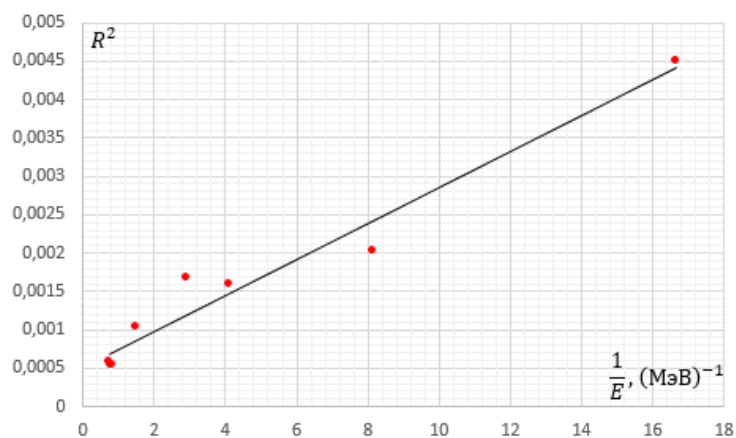


Рис. 4: Спектры ^{137}Cs и неизвестного образца

5.5 Энергии края комптоновского рассеяния

Определим энергии края комптоновского поглощения для образцов ^{22}Na , ^{137}Cs , ^{60}Co (табл.) и сравним их с соответствующими справочными значениями. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3: Результаты определения энергии края комптоновского поглощения

Образец	E_{exp} , МэВ	E_{thr} , МэВ
^{60}Co	0,922	0,963
^{137}Cs	0,448	0,477
^{22}Na	0,999	1,062

В спектрах, где наблюдаются пики обратного рассеяния, определим энергии этих пиков и сравним измеренные значения с определёнными по формуле (1). Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4: Энергии пиков обратного рассеяния

Образец	E_{exp} , МэВ	E_{thr} , МэВ
^{60}Co	0,228	0,209
^{60}Co	0,228	0,214
^{137}Cs	0,198	0,184

Эти значения практически совпадают. Пики обратного рассеяния в спектре кобальта, отвечающие разным пикам полного поглощения, на графике неразрешимы (виден один широкий пик).

6 Вывод

В ходе работы после калибровки прибора были сняты спектры образцов ^{22}Na , ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{241}Am , ^{152}Eu , а также исследован спектр неизвестного образца и определен его состав — ^{137}Cs . В спектрах были исследованы пики, соответствующие следующим взаимодействиям гамма-квантов с веществом:

- фотоэффект (пики полного поглощения)
- эффект Комптона (характерное распределение энергий в спектре, оканчивающееся комптоновским краем)
- обратное рассеяние (пики обратного рассеяния)
- аннигиляция позитронов (пик 511 кэВ в спектре натрия, по которому проводилась калибровка)

7 Приложение: спектрограммы

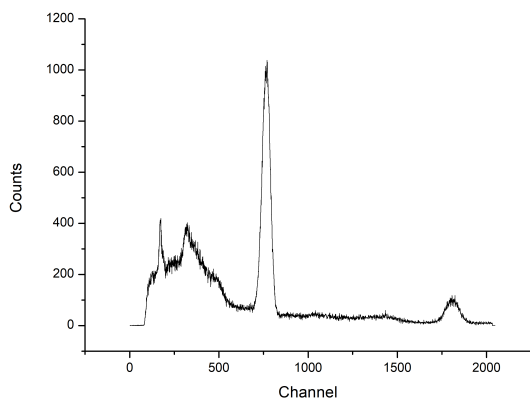


Рис. 5: Спектр ^{22}Na

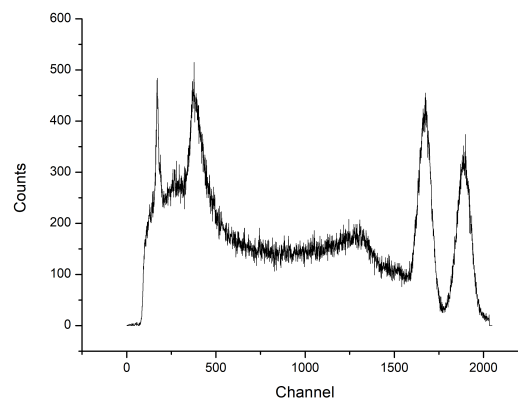


Рис. 6: Спектр ^{60}Co

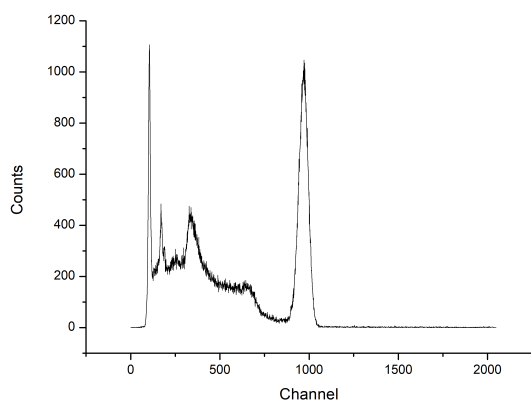
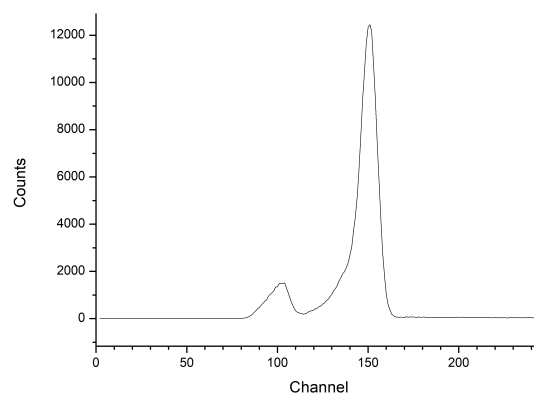
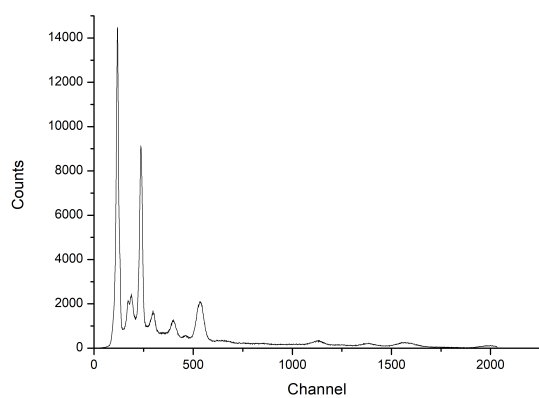
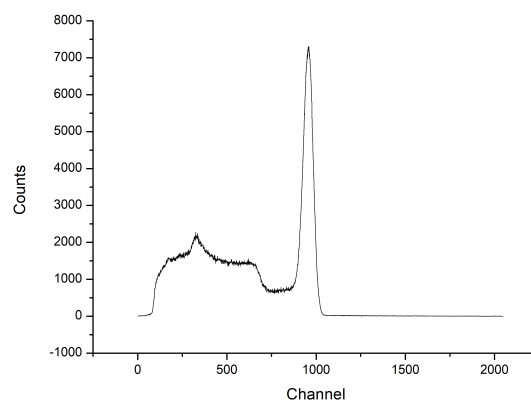
Рис. 7: Спектр ^{137}Cs Рис. 8: Спектр ^{241}Am Рис. 9: Спектр ^{152}Eu 

Рис. 10: Спектр неизвестного образца

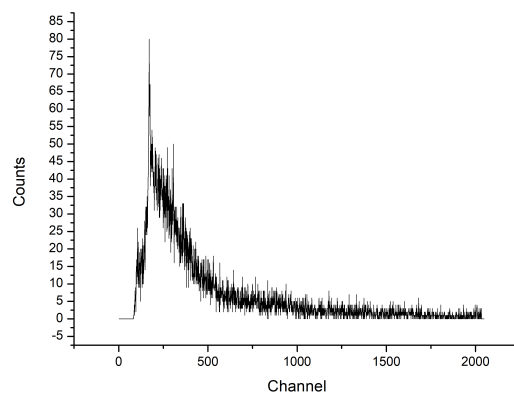


Рис. 11: Спектр шума