

Работа 4.4.3  
Изучение призмы с помощью гониометра

Шарапов Денис, Б05-005

**Содержание**

<b>1</b>	<b>Аннотация</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Теоретические сведения</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Результаты измерений и обработка данных</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Вывод</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Приложение: графики</b>	<b>4</b>

## 1 Аннотация

**Цель работы:** знакомство с работой и настройкой гониометра Г5, определение зависимости показателя преломления стекла призмы от длины волны, определение марки стекла и спектральных характеристик призмы.

**В работе используются:** гониометр, ртутная лампа, призма.

## 2 Теоретические сведения

Показатель преломления материала призмы  $n(\lambda)$  удобно определять по углу наименьшего отклонения  $\delta(\lambda)$  (рис. 1). Минимальное отклонение луча, преломлённого призмой, от направления луча, падающего на призму, получается при симметричном ходе луча (в призме луч идёт параллельно основанию). Угол минимального отклонения  $\delta$ , преломляющий угол  $\alpha$  (угол при вершине призмы) и показатель преломления связаны соотношением

$$n(\lambda) = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta(\lambda)}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

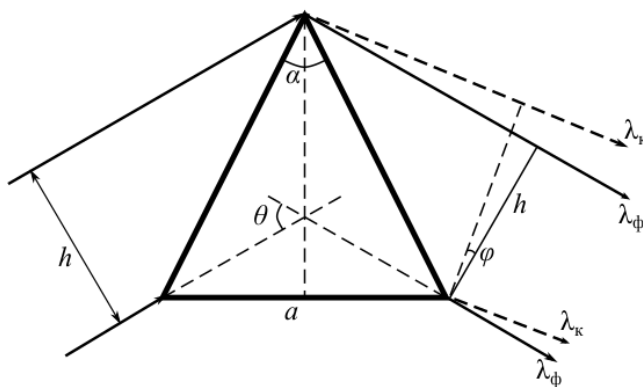


Рис. 1: Ход лучей в призме для угла наименьшего отклонения

## 3 Результаты измерений и обработка данных

Измеренные углы наименьшего отклонения 6-ти ярких линий спектра ртути представлены в табл. 1. По этой таблице вычислим значение показателя преломления (табл. 2) и построим график (рис. 2).

Таблица 1: Результаты измерения наименьшего отклонения 6-ти ярких диний спектра ртути

$K_1$	$K_2$	1	2	3	4	5	6
$86^\circ 02' 56''$	$85^\circ 36' 31''$	$85^\circ 34' 19''$	$85^\circ 36' 01''$	$85^\circ 29' 56''$	$85^\circ 29' 14''$	$85^\circ 13' 52''$	$85^\circ 11' 21''$

Таблица 2: Результат измерения наименьшего отклонения 6-ти ярких линий спектра ртути

№	$K_1$	$K_2$	1	2	3	4	5	6
$\lambda$ , нм	690,7	623,4	579,1	577,0	546,1	491,6	435,8	404,7
$n$	1,46750	1,46970	1,47060	1,47065	1,47120	1,47222	1,47480	1,47623

По графику определим значения  $n_D$  (жёлтый дублет натрия),  $n_F$  (голубая линия водорода) и  $n_C$  (красная линия водорода)

$n_D$	$n_F$	$n_C$
$1,4704 \pm 0,0001$	$1,4724 \pm 0,0001$	$1,4687 \pm 0,0001$

Рассчитаем среднюю дисперсию оптического стекла

$$D = n_F - n_C = 0,0037 \pm 0,0002$$

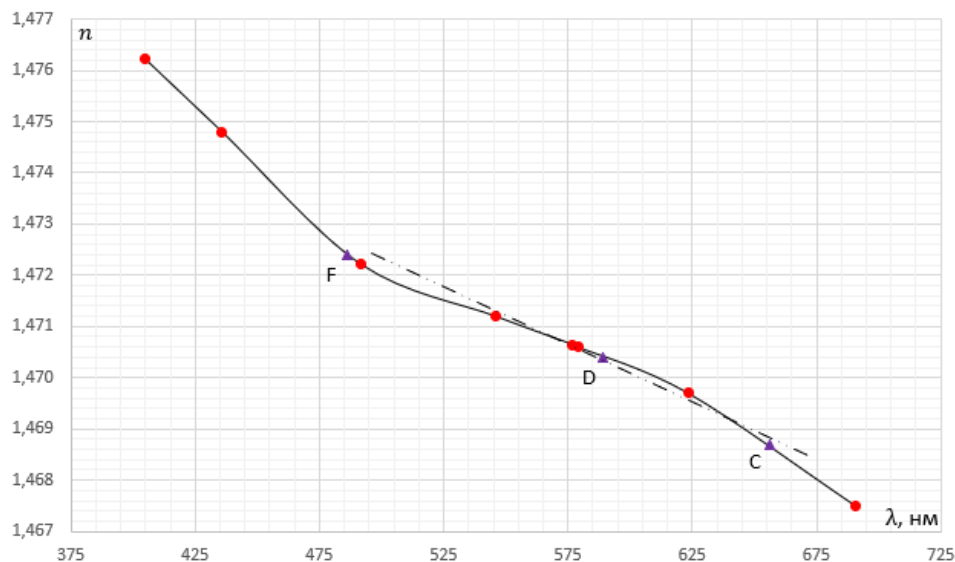


Рис. 2: Дисперсионная кривая. Треугольниками обозначены точки F, D, C, соответствующие длинам волн 486, 1, 589, 3, 656, 3 нм соответственно

и коэффициент дисперсии

$$\nu = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C} = 125 \pm 5.$$

По наклону прямой  $|\frac{dn}{d\lambda}| = 2,4 \cdot 10^3 \text{ см}^{-1}$  рассчитаем максимальную разрешающую способность призмы

$$R = b \frac{dn}{d\lambda} \approx (1,776 \pm 0,002) \cdot 10^4.$$

Для оценки разрешающей способности призмы воспользуемся табл. 3 и сопроводительным рисунком (рис. 3).

Таблица 3: Измерение угловой ширины жёлтых линий дублета

$x_0$	$x_1$	$x_2$	$x_3$
7'14"	6'40"	5'53"	5'23"

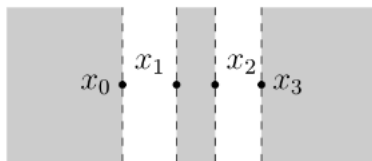


Рис. 3: Измерение угловой ширины жёлтых линий дублета

Рассчитаем экспериментальную величину  $R$  по измерениям жёлтого дублета

$$R > \frac{d\lambda}{\lambda} \approx 275.$$

Рассчитаем угловую дисперсию

$$\frac{d\phi}{d\lambda} = 0,0126 \pm 0,0006 \text{ нм}^{-1}$$

и сравним её с дисперсией решётки в первом порядке, имеющей 100 штр/мм:

$$D = 5,73 \cdot 10^5 \text{ нм}^{-1}.$$

## 4 Вывод

В ходе работы исследовали дисперсию света ртутной лампы на стеклянной призме. По измеренным данным определили показатели преломления для длин волн жёлтого дублета натрия, голубой и красной линий водорода. По графику, изображенному на рис. 2, можно определить марку стекла (по наклону). Полученное значение соответствует марке стекла ТФЗ. Также с помощью графика была получена максимальная разрешающая способность призмы. Далее была исследована экспериментальная величина  $R$  по измерениям жёлтого дублета. После чего была рассчитана угловая дисперсия, которую сравнили с дисперсией решётки в первом порядке.

## 5 Приложение: графики

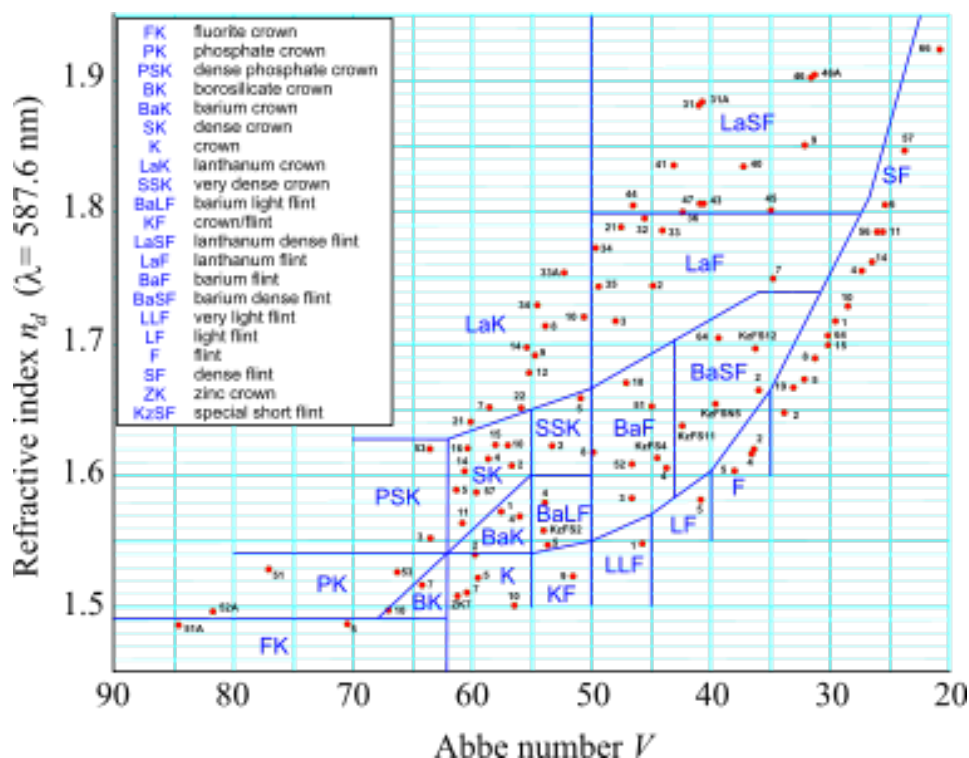


Рис. 4: Диаграмма Аббе